

OvaCyte™

Bienvenido al futuro de la parasitología

OvaCyte™ es un sistema compacto e innovador de punto de atención que utiliza análisis digital e inteligencia artificial (IA) para contar e identificar huevos de parásitos intestinales y trematodos en una amplia variedad de especies hospedadoras.



Ultrarrápido, fácil, inteligente y fiable

Solo <3 minutos de manipulación para una preparación sencilla de la muestra, antes de que un proceso completamente automatizado ofrezca resultados rápidos y confiables. No se requiere formación técnica.



Software impulsado por IA

El software impulsado por IA de OvaCyte elimina la necesidad de microscopía manual, aprovechando una biblioteca de más de 1 millón de imágenes y 150,000. tagged parasites.



Resultados precisos en minutos

Los resultados están disponibles en tiempo real durante el escaneo en la pantalla táctil del analizador OvaCyte y de inmediato después de que se completa el escaneo en la aplicación web de OvaCyte, incluyendo todas las imágenes y los informes del escaneo.

Nuevas soluciones ahora disponibles

PLUS-Cassette – 3 veces más sensible (33% menos plástico)

Diferenciación de Estróngilos (*Haemonchus contortus*) y *Nematodirus* (*N. battus*) en ovejas

Próximamente: **Dual-Cassette**, que permite analizar dos muestras a la vez (66% menos plástico en la mitad del tiempo)




Prueba FEC estándar (Kit de prueba OvaCyte EQ & LA FEC PLUS)

Equino	Bovino/Ovino
Estróngilos	Estróngilos
<i>Parascaris spp.</i>	<i>Coccidia</i> (Eimeria spp.)
<i>Strongyloides westeri</i>	<i>Moniezia spp.</i>
<i>Anoplocephala spp.</i>	<i>Nematodirus spp.</i>
<i>Oxyuris equi</i>	<i>Strongyloides papillosus spp.</i>

Prueba de trematodos (Kit de prueba OvaCyte LA Fluke PLUS)


Bovino/Ovino
<i>Fasciola hepatica</i>
<i>Paramphistomum spp.</i>

OvaCyte es tan fácil como A, B, C.

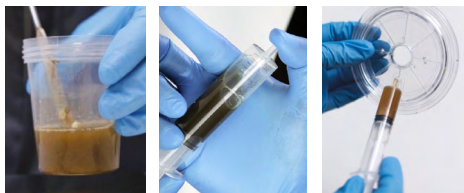

A. Preparación

Pesa la muestra fecal, mézclala con la solución de flotación proporcionada y pásala a través de los filtros proporcionados. Desgasifica la muestra para eliminar el aire y luego llena el cassette con la solución filtrada.

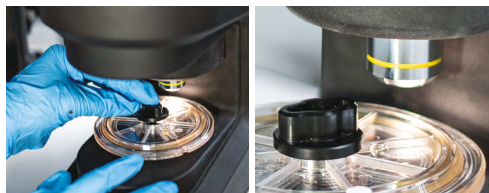

B. ¡Cargar y listo!

Carga el casete en el analizador OvaCyte y comienza el escaneo. El escaneo, análisis e informes son completamente automatizados. El software de reconocimiento de imágenes impulsado por IA identifica cada especie de parásito en la biblioteca y el número de huevos o ooquistes parasitarios presentes.



C. Obtén resultados e informes

En solo 6 minutos para FEC y 15 minutos para FLUKE, los resultados están disponibles en el dispositivo OvaCyte y en la aplicación web en tu computadora o smartphone. Además, todas las imágenes del escaneo están disponibles.

Ordering information

Producto*	Descripción corta/contenido	Cat. No.
OvaCyte Fecal Analyzer	Dispositivo compacto con pantalla táctil integrada, incluyendo cables de alimentación, adaptador de corriente, tuerca de bloqueo y cable Ethernet.	TN-FP1001-02A For U.S.: FP1001-USA
Univesal EQ & LA Starter Pack with Fluke	Obtén todo lo que necesitas para comenzar tu viaje con OvaCyte EQ & LA y Fluke	FP25001
OvaCyte EQ & LA FEC PLUS Test Kit	40 casetes EQ & LA y 2 x 1 litros de líquido de flotación EQ & LA.	FP27001 (40)
OvaCyte LA Fluke PLUS Test Kit	40 casetes Fluke y 1 litro de líquido de flotación Fluke	FP16001 (40)

*Los productos no están destinados al diagnóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad.



Escanea el código QR para ver OvaCyte en acción.



Escanea el código QR para obtener más información sobre OvaCyte y reservar una demostración gratuita.

Póngase en contacto con nuestros especialistas: www.indical.com

Solicite un presupuesto o haga un pedido en línea: shop.indical.com

Correo electrónico: rosa.oliveira@indical.com | Llamar: **0034 647 589 423**

Conéctese con nosotros en LinkedIn: www.linkedin.com/company/indical

Los productos no están destinados al diagnóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad. Para obtener información actualizada sobre licencias y descargos de responsabilidad específicos de los productos, consulte el respectivo manual o guía del usuario. Los requisitos regulatorios varían según el país; los productos pueden no estar disponibles en su área geográfica. Marcas registradas: INDICAL® (INDICAL BIOSCIENCE GmbH), OvaCyte™ (Telenostic Ltd.). Los nombres registrados, marcas comerciales, etc., utilizados en este documento, incluso cuando no estén específicamente marcados como tales, no deben considerarse desprotegidos por la ley. Las imágenes de los productos pueden diferir del producto real. INFLY-OvaCyte-ES-251028 © 2025 INDICAL BIOSCIENCE

INDICAL
BIOSCIENCE

INDICAL BIOSCIENCE GmbH
Deutscher Platz 5b
04103 Leipzig, Germany